



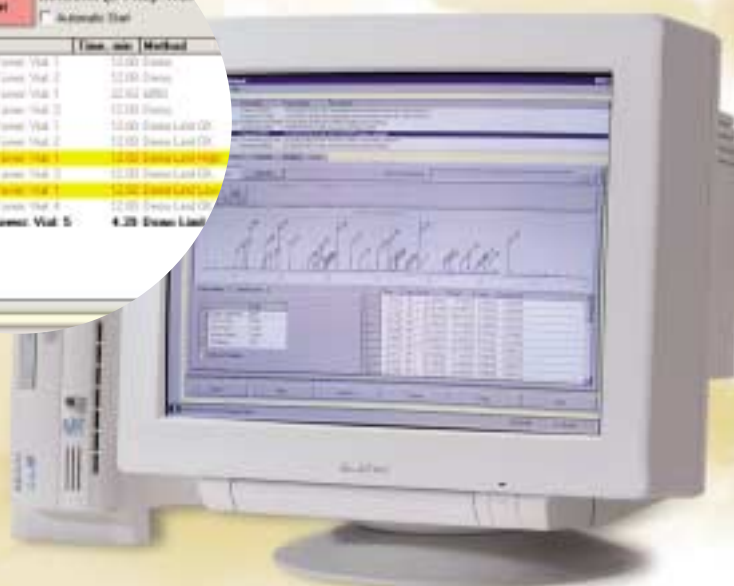

進歩を遂げてもしンプルなままで、
どなたにもお使いいただける

Cerity ネットワークデータシステム for Chemical QA/QC

石油化学業界での
ルーチン分析に理想的です

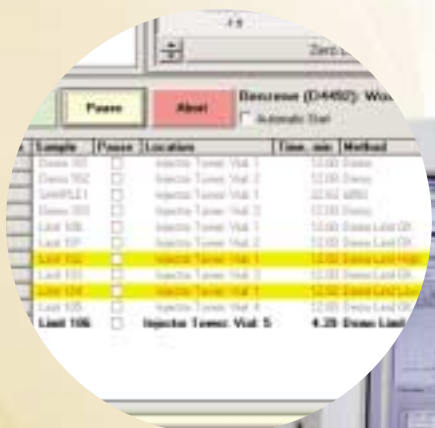


Agilent Technologies



実験開始から製品完成にいたるまで、
Cerity ネットワークデータシステム(NDS)
for Chemical QA/QCは、
**実験室での使いやすさを第一に
目指します。**

使いやすさのポイント — 1画面のみによる操作

- ・ サンプルを分析するスケジュールを決めます。
- ・ 分析を開始します。
- ・ クロマトグラムをリアルタイムで表示します。
- ・ どのサンプルが規格から外れており、解析が必要かどうかわかります。

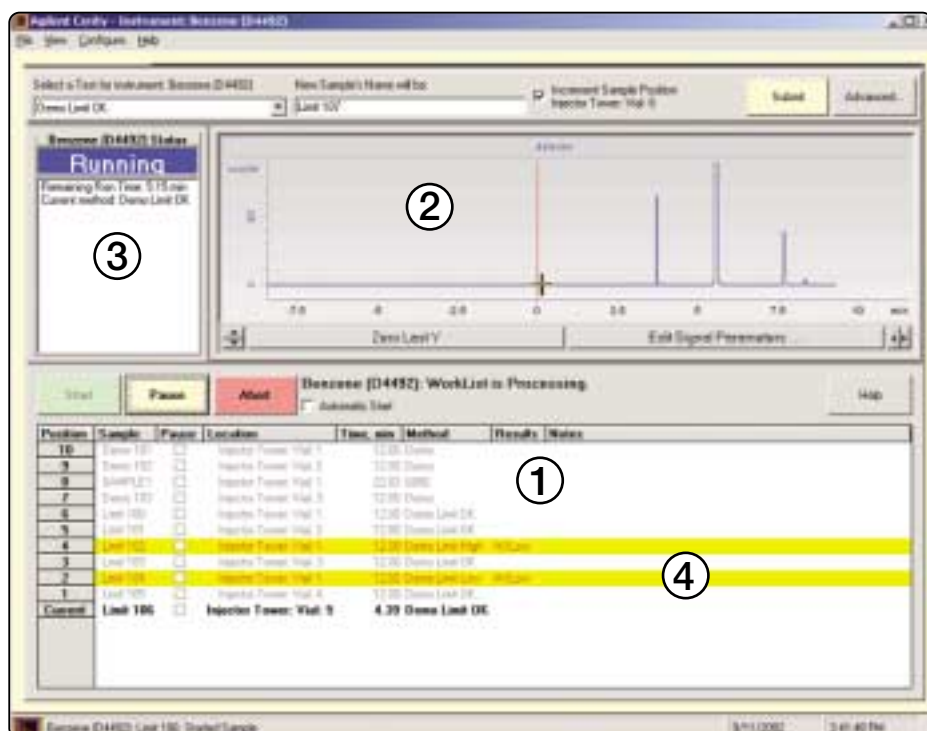


本ソフトでは、装置パラメータではなく、サンプル自体が各分析の中心となっています。これからは、長々としたファイル名で検索をかける必要はありません。サンプル名か、実行する分析項目を入力するだけです。これによって、キー入力や、画面の切り換えを最小限にすることができます。

一画面ですべての分析を管理します。この画面には、サンプル作業リスト①、リアルタイム・シグナルプロット②、システム運用ステータス③が表示されます。規格外サンプル④のハイライト表示もされ、離れた場所からも簡単に認識できます。オペレータはこれらの状態を担当者に知らせ、サンプル分析作業を続行できます。

*Amazingly
easy to use*

Cerity NDS

思いのままに操作できる設計

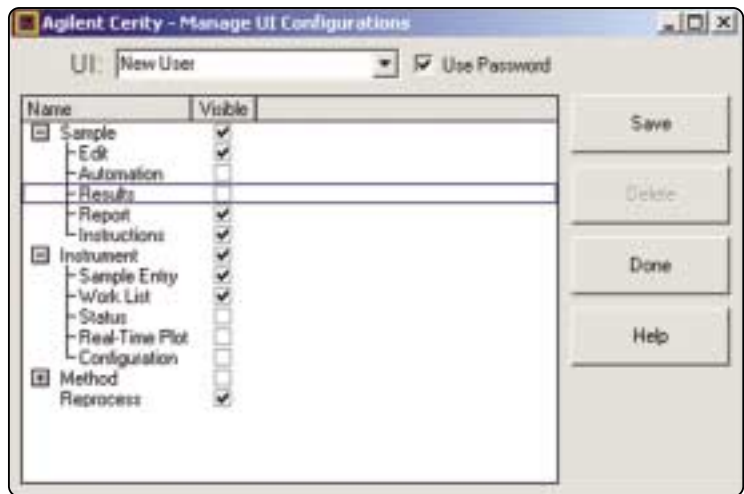

使いやすさのポイント

— 各ユーザに必要な要素だけを表示

Cerity NDS for Chemical QA/QCは、ユーザの皆さん個人のニーズやスキルに合わせて設定できます。

ユーザの使用画面は、自由に設定を変更することができるので、新規ユーザの方に対しては必要なものだけを表示できます。これにより偶発的なミスを減らし、ソフトのトレーニング時間を大幅に短縮できます。ニーズやスキルのレベル変化に従って、それに見合った機能を簡単に追加することができます。

使いやすさのポイント

— 9ヶ国語に対応

本ソフトの全画面、オンラインヘルプ、およびチュートリアルが以下の言語（ブラジル・ポルトガル語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語）に対応しています。このような快適な環境によりユーザのソフト習得速度が増し、ミスを減らし、トラブルシューティングにも役立ちます。



使いやすさのポイント

— 自動設定が簡単

毎時分ごと、17分ごと、または1日おきなど、いつでも任意の時間に分析実行を自動で行うことができます。それには時間間隔を入力して、開始時間をシステムに伝えるだけです。このように、生産ラインでの定期的な分析が簡単に行えます。

使いやすさのポイント

— 制限値を自動でチェック

サンプル中の測定成分の上限・下限量を指定することができます。測定成分がこれらの制限値を越えると、該当メッセージが作業リストや分析レポートに即座に表示されます。

Benzene [D4482]: WorkList is Processing						
Automatic Start						
Passcode	Sample	Passcode	Location	Time, min	Method	Remarks/Notes
10	Link 100		Injector Tower: Vial 1	12:00	Online	
9	Link 102		Injector Tower: Vial 2	12:00	Online	
8	Link 101		Injector Tower: Vial 3	20:00	Online	
7	Link 103		Injector Tower: Vial 4	12:00	Online	
6	Link 104		Injector Tower: Vial 5	12:00	Online	
5	Link 105		Injector Tower: Vial 6	12:00	Online	
4	Link 106		Injector Tower: Vial 7	12:00	Online	
3	Link 107		Injector Tower: Vial 8	12:00	Online	
2	Link 108		Injector Tower: Vial 9	12:00	Online	
1	Link 109		Injector Tower: Vial 10	12:00	Online	
Current	Link 100		Injector Tower: Vial 1	4.39	Online	

制限値を越えた測定成分をはっきりと通知することで、素早い意思決定が可能になります。

ルーチン分析法の開発と サンプル分析が実に簡単である ことを直接ご体験いただけます。



www.agilent.com/chem/nds

Cerity NDS for Chemical QA/QCが提供する 主な機能

- Agilent、5890 Series II、6850、6890、M200、Quad および Agilent3000 Micro GCに対応するGCパラメータを全面的に制御
- 35900E A/Dコンバータをサポートし、他社製品の機器からデータを収集・分析
- 一度に最大8つまでのGCシステムを制御
- スムーズなソフト習得とトラブルシューティングのために統合されたオンラインヘルプシステムとチュートリアル
- LIMSまたは企業システム相互間でデータのやりとりが可能
- 単一の総合的データベースにデータが保存され、管理が容易で、的確な関連データを素早く取り出すことができる

お試しください！

Cerity NDS for Chemical QA/QC の無料 Demo CD-ROMでは、本ソフトをお試しにすることができます。バーチャル(仮想)GCとデータファイルが収録され、ルーチン分析法の開発とサンプル分析が実に簡単であることを直接ご体験いただけます。実際のGCに接続して注入を行うこと以外はすべての操作が可能です。

以下のことが実行できます。

- メソッド作成
- キャリブレーション実行
- バーチャル(仮想)サンプルを使用した分析実行

このCerity CD-ROMをご希望の方は、www.agilent.co.jp/chem/nds のサイトへどうぞ。Cerity NDS for Chemical QA/QC を選択してDemo CDをクリックし、サンプルCDをご注文できます。

Cerity NDS for Chemical QA/QC の詳細情報については下記にお問合せください。

ここに記載された情報は、断りなく変更されることがあります。

© Agilent Technologies, Inc. 2002

Printed in USA November 25, 2002
5988-8312JAJP

横河アナリティカルシステムズ株式会社 本社/〒192-0033 東京都八王子市高倉町9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111

- 1) システム、製品および部品に関するご相談窓口
- 2) 製品の操作、アプリケーションの問合せおよび故障時の連絡窓口